


Test IDEXX Cancer Dx™:

Interpretazione dei risultati per cani clinicamente malati

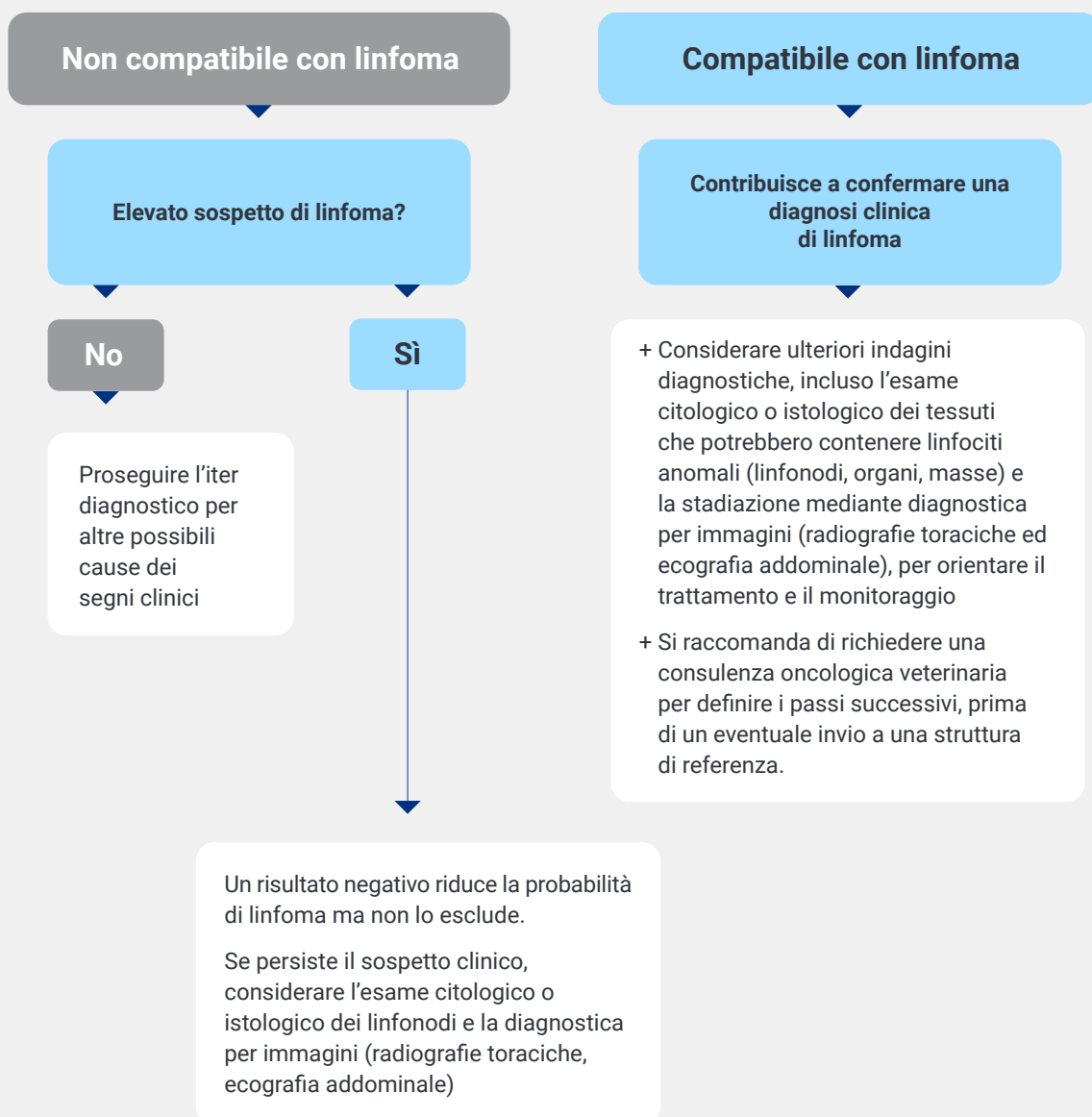

Test IDEXX Cancer Dx™:

Interpretazione dei risultati per cani clinicamente sani

Non compatibile con linfoma

Il risultato indica assenza di linfoma rilevabile; rivalutare il paziente al prossimo controllo di routine programmato*

Compatibile con linfoma

Valutare anamnesi completa, esame obiettivo ed esami del sangue

Per confermare la presenza di patologia, potrebbe essere indicata un'ulteriore valutazione, che includa i seguenti esami:

- + Aspirati o biopsia di linfonodi/ organi
- + Diagnostica per immagini (radiografie toraciche ed ecografia addominale)
- + Citometria a flusso su sangue in caso di linfocitosi

Se il linfoma non viene rilevato, ripetere l'esame obiettivo dopo 8-12 settimane (o prima se compaiono nuovi sintomi)

*L'American Animal Hospital Association (AAHA) raccomanda un esame di routine ogni 6 mesi in cani anziani e ogni anno in tutti gli altri cani.¹

Riferimento bibliografico

1. Creevy KE, Grady J, Little SE, et al. 2019 AAHA Canine Life Stage Guidelines. *J Am Anim Hosp Assoc.* 2019;55(6):267–290. doi:10.5326/JAAHA-MS-6999