



Analizzatore della coagulazione IDEXX Coag Dx™

Guida di consultazione rapida

Componenti dell'Analizzatore della coagulazione Coag Dx™

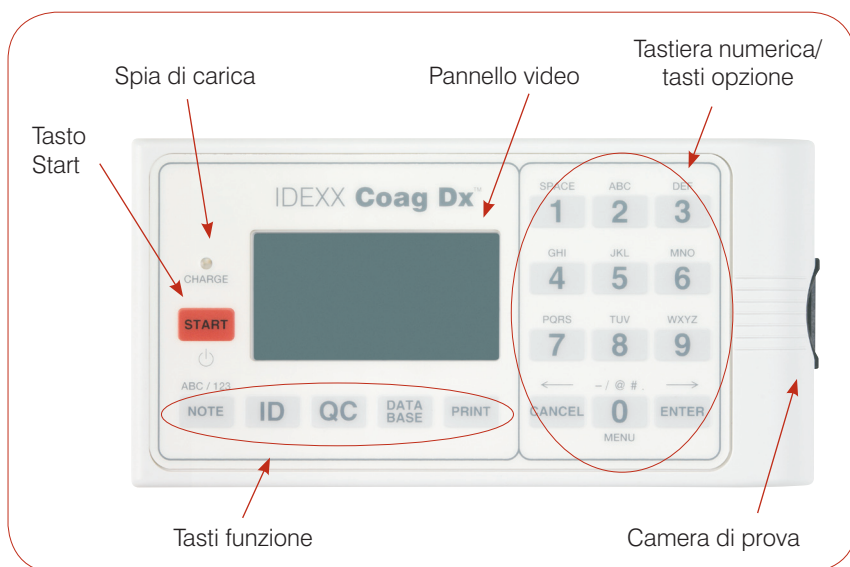

Vista dall'alto dell'Analizzatore della coagulazione IDEXX Coag Dx

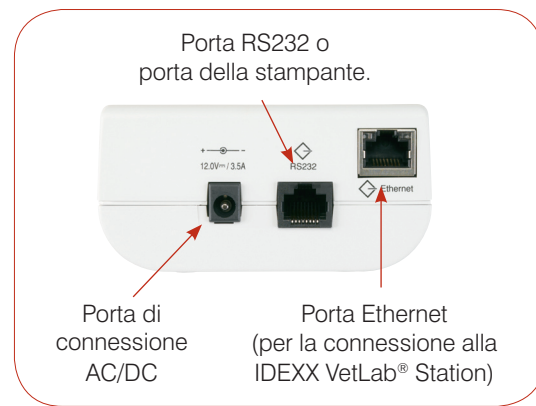

Vista laterale dell'Analizzatore della coagulazione IDEXX Coag Dx

Importante:

Nell'Analizzatore della coagulazione IDEXX Coag Dx™ usare esclusivamente cartucce IDEXX Coag Dx™.

Tasti numerici/Opzione/Funzione

Tasto	Descrizione
Start	<ul style="list-style-type: none"> • Premere e tenere premuto questo tasto per accendere o spegnere l'analizzatore. • Premere questo tasto per iniziare il test.
Note	Premere questi tasti per attivare o disattivare i caratteri alfabetici (ABC) e numerici (123) durante la modalità di inserimento dati.
ID	Premere questo tasto per visualizzare il menu Identify Patient (Identificazione Paziente) da cui è possibile: <ul style="list-style-type: none"> • Inserire la ID del cliente (CID). • Inserire la ID del paziente (PID). • Selezionare una specie. • Richiamare l'ultimo cliente o paziente.
QC	Premere questo tasto per visualizzare il menu QC Status (Stato del Controllo Qualità) da cui è possibile avviare il test EQC (Electronic Quality Control, Controllo di Qualità Elettronico). La camera di prova deve essere vuota per permettere l'esecuzione del test EQC.
Print	Premere questo tasto per visualizzare il menu Print (Menu Stampa) da cui è possibile stampare i risultati o le informazioni sul sistema con una stampante esterna.

Tasto	Descrizione
Data Base	Premere questo tasto per visualizzare il menu Data Base (Data Base) da cui è possibile: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare il numero del paziente o i risultati del test EQC attualmente salvati e disponibili. • Visualizzare i risultati salvati relativi al paziente o al test EQC. • Eliminare le informazioni sul paziente o sul test EQC.
0 - 9	<ul style="list-style-type: none"> • Premere uno di questi tasti per selezionare un'opzione del menu. • Premere uno di questi tasti per inserire numeri o lettere. • Premere 0 per visualizzare il Main menu (Menu principale). • Premere 7 per visualizzare i risultati precedenti oppure premere 9 per visualizzare i risultati successivi.
Cancel	<ul style="list-style-type: none"> • Premere questo tasto per sospendere un'operazione. • Premere questo tasto per tornare alla schermata principale (videata "Insert...Cartridge", (Inserire... cartuccia)). • Premere questo tasto per spostare il cursore a sinistra durante la modalità di inserimento dati.
Enter	<ul style="list-style-type: none"> • Premere questo tasto per accettare e salvare un inserimento. • Premere questo tasto per spostare il cursore a destra durante la modalità di inserimento dati.

Precauzioni d'uso

- Durante il periodo di non utilizzo, tenere il dispositivo di potenza AC/DC connesso all'analizzatore e a una presa di corrente, e tenere l'analizzatore acceso.
- **Non** aprire l'analizzatore. Non contiene parti riparabili dall'utente. L'apertura dell'analizzatore rappresenta una violazione dell'accordo sulla garanzia e/o sulla manutenzione.
- **Non** usare qualunque altro tipo di cartucce all'infuori delle cartucce IDEXX Coag Dx.
- **Non** usare le cartucce oltre alla data di scadenza riportata sulla confezione o non conservate correttamente.
- **Non** forzare l'inserimento della cartuccia nell'analizzatore.
- **Non** premere con eccessiva forza sui tasti dell'analizzatore.
- **Non** esporre l'analizzatore a temperature estreme (superiori a 37°C o inferiori a 0°C).
- **Proteggere** l'analizzatore dagli urti. **Non** utilizzare i risultati nel caso in cui l'analizzatore sia stato soggetto a urti durante l'esecuzione del test.

Collegare l'Analizzatore della coagulazione Coag Dx™ alla IDEXX VetLab® Station (versione 2.30 o successiva)

Il collegamento dell'Analizzatore IDEXX Coag Dx alla IDEXX VetLab Station (Figura 1) consente di identificare il paziente e di trasferire automaticamente i risultati del test di coagulazione alla cartella clinica del paziente.

Importante: Quando l'Analizzatore Coag Dx è collegato alla IDEXX VetLab Station, non è possibile avviare il test dall'analizzatore. Tutti i test devono essere avviati dalla IDEXX VetLab Station.

Per collegare l'analizzatore Coag Dx alla IDEXX VetLab Station:

1. Assicurarsi che l'Analizzatore Coag Dx e la IDEXX VetLab Station siano accesi.
2. Collegare un'estremità del cavo Ethernet alla porta corrispondente, ubicata sul lato dell'Analizzatore Coag Dx.
3. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet al router che è connesso alla IDEXX VetLab Station. Utilizzare la prima porta LAN disponibile (contrassegnate con 1, 2, 3 ecc.).

Importante: **Non** usare la porta WAN, che si connette a Internet.

4. Quando l'icona Coag Dx viene visualizzata sulla Schermata principale della IDEXX VetLab Station, tutte le connessioni sono state completate.

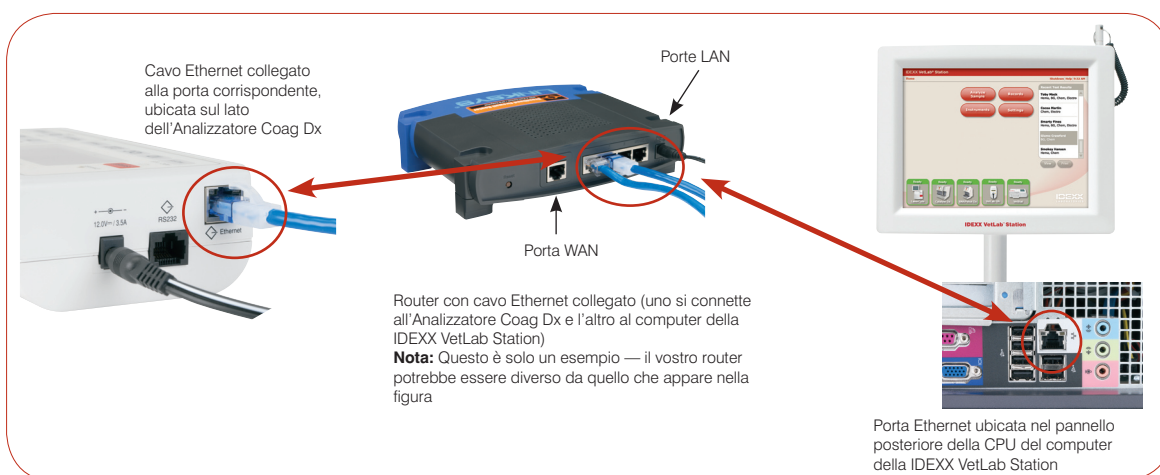


Figura 1

Assistenza tecnica IDEXX:

USA/Canada/America Latina 1-800-248-2483 • Europa 00800 1234 3399

Australia 1800 655 978 • Nuova Zelanda 0800-102-084

Asia 886-2-28883336,230

IDEXX
LABORATORIES