

Analizzatore IDEXX VetLab* UA*

Guida rapida di riferimento

Lettura delle strisce IDEXX UA*


Utilizzare urina fresca che non sia stata centrifugata. Mescolare a fondo il campione di urina. Il campione dovrà essere a temperatura ambiente quando l'analisi è eseguita e non deve essere trascorsa più di un'ora.

Per ulteriori istruzioni, vedere il *manuale operativo dell'analizzatore IDEXX VetLab* UA**.



- 1 Utilizzare una pipetta per coprire la striscia UA con il campione di urina, accertandosi che tutti i tamponi di analisi siano inumiditi. Non piegare la striscia.

IMPORTANTE: solo le strisce IDEXX UA possono essere utilizzate sull'analizzatore IDEXX VetLab UA. Non utilizzare alcuna altra marca di strisce.

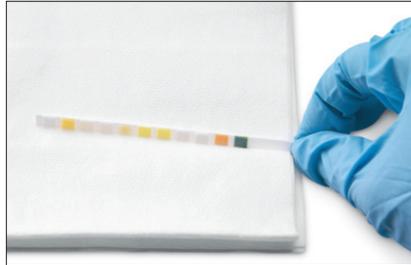

- 2 Picchiettare brevemente (per circa un secondo) il bordo lungo e quindi il retro della striscia di analisi su una superficie assorbente (ad es. un tovagliolo di carta).



- 3 Collocare la striscia di analisi, con i tamponi di analisi rivolti verso l'alto, nell'alloggiamento per strisce in modo che il suo margine inferiore sia inserito nel morsetto. Il fermo deve essere aperto. Circa 2 mm della striscia devono essere inseriti sotto il morsetto.



- 4 Premere il pulsante **Start**. Viene emesso un segnale acustico. L'alloggiamento avanza leggermente e il fermo si chiude.

L'alloggiamento inserisce automaticamente la striscia di analisi nell'analizzatore, in modo che possa essere letta, quindi ritorna alla sua posizione iniziale. Non rimuovere la striscia di analisi fino a quando l'analizzatore non ritorna nella modalità di pronto per la misurazione. Sono necessari circa 80 secondi da quando si preme il pulsante Start fino al completamento di tutte le misurazioni.



- 5 Dopo la stampa dei risultati, rimuovere e smaltire la striscia di analisi. Rimuovere eventuali residui di urina dall'alloggiamento passando un panno privo di sfilaccature.

NOTA: se l'analizzatore IDEXX VetLab UA è connesso alla IDEXX VetLab Station, i risultati dell'analisi sono trasmessi automaticamente.

Assistenza tecnica IDEXX

USA/Canada/America Latina 1-800-248-2483

Europa 00800 1234 3399

Australia 1300 44 33 99

Nuova Zelanda 0800-102-084

Asia 0800-291-018