



L'analizzatore biochimico IDEXX Catalyst Dx® ha una marcia in più!

Una volta collegato ad IDEXX VetLab® Station, l'analizzatore biochimico IDEXX Catalyst Dx® vi consente di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti e a molte altre informazioni utili.

- Assembla in un unico referto tutti i risultati degli analizzatori IDEXX VetLab®Suite compresi quelli dei test SNAP®, in modo da ottenere un quadro complessivo della salute del paziente
- Riporta a video in modo automatico e successivamente sulla stampa del referto i risultati degli esami precedenti, per un facile confronto
- Offre una visione chiara dei progressi del paziente, fornendo i grafici dell'andamento dei parametri ricercati nel corso del tempo

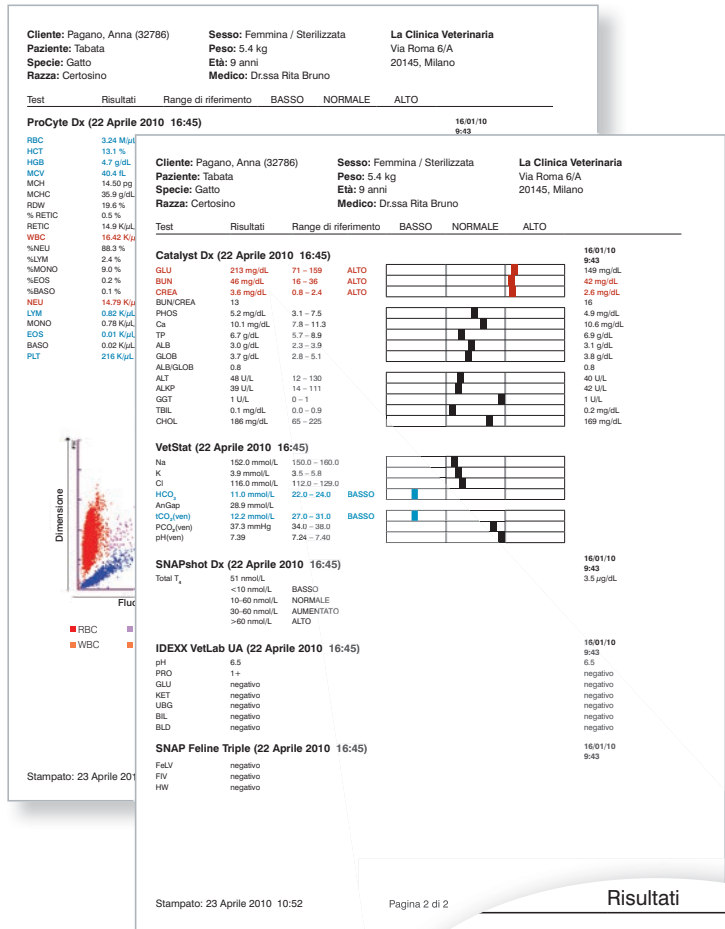

Integrazione

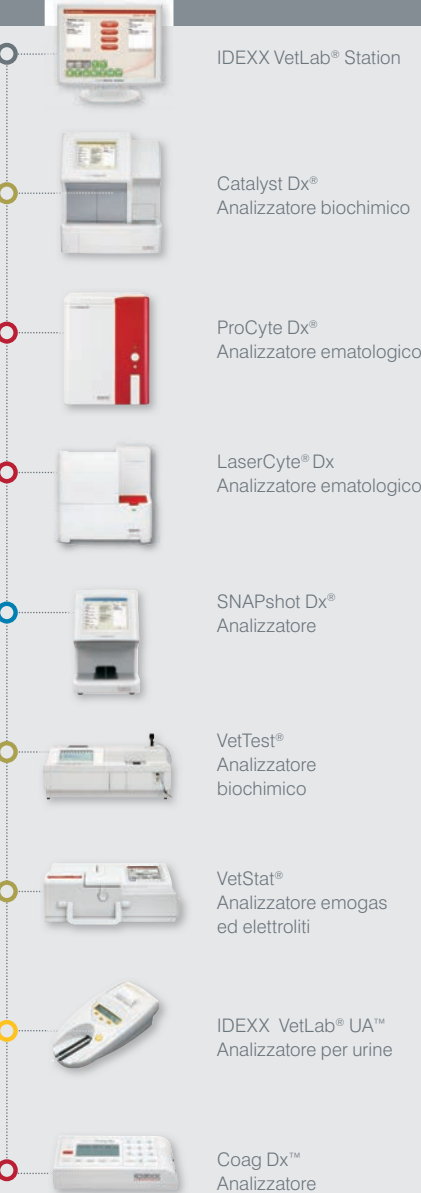

L'analizzatore IDEXX Catalyst Dx® è parte integrante del sistema modulare IDEXX VetLab® Suite, una suite di analizzatori specifici per uso veterinario connessi tra di loro, in grado di offrire una possibilità diagnostica in clinica e un livello di consolidamento delle informazioni senza precedenti.

IDEXX VetLab® Suite vi permette di offrire un ottimo servizio ai vostri clienti e lavorare in modo più soddisfacente e con maggiore profitto per la vostra struttura.

IDEXX Catalyst Dx®

Analizzatore biochimico e per elettroliti



Il massimo dell'efficienza per gli esami biochimici in clinica

IDEXX Assistenza Clienti (numero verde 800 917 940)
00800 1234 3333
CSITALY@idexx.com | www.idexx.it



Tutti i marchi ®/TM sono di proprietà di IDEXX Laboratories, Inc. o di suoi associati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. La politica di tutela della privacy di IDEXX è disponibile sul sito idexx.it © 2012 IDEXX Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati • 7839-06 IT

Create il profilo che volete per ogni paziente

Offrite un servizio eccellente e delle risposte certe

Avvaletevi di un sistema efficiente ed affidabile


Un menù completo ed esclusivo e una totale flessibilità

La **flessibilità del menù** dell'analizzatore IDEXX Catalyst Dx® soddisfa le vostre esigenze diagnostiche quotidiane, consentendovi di **monitorare** lo stato di salute di organi specifici, **ricontrollare** certi parametri nel corso del tempo, personalizzare i profili aggiungendo singoli test alle CLIP pre-assemblate ed eseguire contemporaneamente le analisi **del sangue e delle urine per una diagnosi tempestiva** delle patologie renali.

29 parametri		6 valori calcolati
ALB	K ⁺	URIC
ALKP	LAC	ALB/GLOB
ALT	LDH	BUN/CREA
AMYL	LIPA	GLOB
AST	Mg	Na ⁺ /K ⁺
BUN	Na ⁺	Osmolalità
Ca	NH ₃	UPC
CHOL	PHBR	
CK	PHOS	
Cl ⁻	TBIL	
CREA	TP	
FRU	TRIG	
GGT	UCRE	
GLU	UPRO	

Assistete più pazienti, in meno tempo, offrendo un servizio eccellente


- Analisi simultanea **di più campioni anche di sangue intero**
- Possibilità di eseguire fino a **25 test** su un singolo campione
- Analisi di **4 CLIP da 10 parametri** in soli 18 minuti
- Caricamento contemporaneo di **più pazienti**: l'analizzatore lavora in completa autonomia. È inoltre possibile introdurre un terzo e un quarto paziente durante l'analisi degli altri due campioni

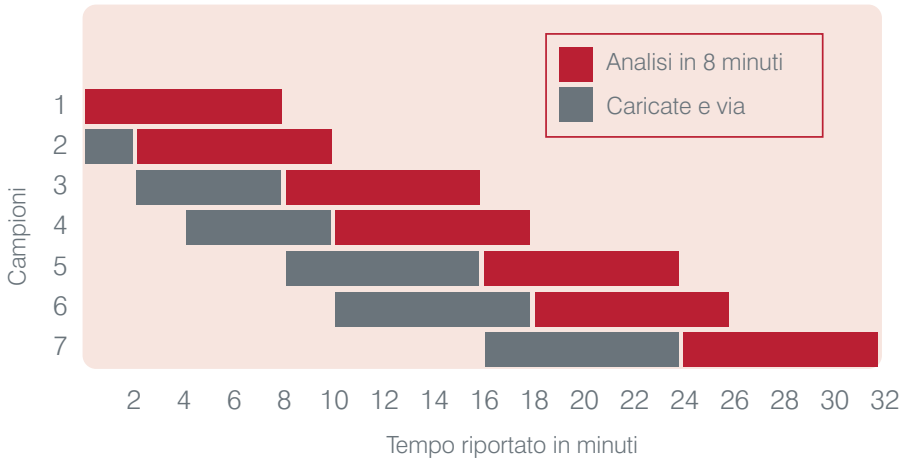

Una precisione garantita e un notevole risparmio di tempo

IDEXX Catalyst DX® si dimostra un sistema ancora più accurato, veloce e preciso grazie alla completa automazione di funzioni ripetitive quali:

- **caricamento delle piastrine**
- **centrifugazione**
- **erogazione del campione**
- **calibrazione**

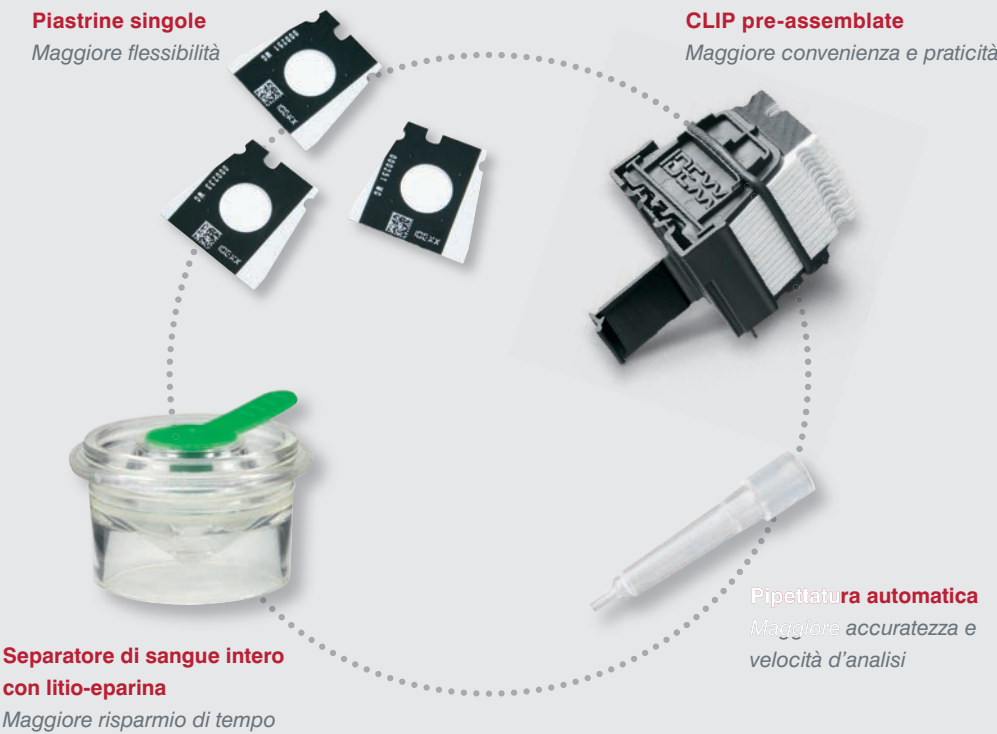

Le nuove clip pre-assemblate offrono profili diagnostici completi

CLIP Chem 17

17 risultati per CLIP – 12 CLIP per confezione

ALB, ALB/GLOB* ALKP, ALT, AMYL, BUN, BUN/CREA* Ca, CHOL, CREA, GGT, GLOB* GLU, LIPA, PHOS, TBIL, TP

CLIP Chem 15

15 risultati per CLIP – 12 CLIP per confezione

ALB, ALB/GLOB* ALKP, ALT, BUN, BUN/CREA* Ca, CHOL, CREA, GGT, GLOB*, GLU, PHOS, TBIL, TP

CLIP Chem 10

10 risultati per CLIP – 12 CLIP per confezione

ALB, ALB/GLOB*, ALKP, ALT, BUN, BUN/CREA*, CREA, GLU, GLOB* TP

CLIP Equine 15

15 risultati per CLIP – 12 CLIP per confezione

ALB, ALB/GLOB* ALKP, AST, BUN, BUN/CREA*, Ca, CK, CREA, GGT, GLOB* GLU, LDH, TBIL, TP

CLIP NSAID 6

6 risultati per CLIP – 12 CLIP per confezione

ALKP, ALT, AST, BUN, CREA, BUN/CREA*

CLIP QC

6 risultati per CLIP – 6 CLIP per confezione

ALB, ALKP, ALT/SGPT, Ca, GLU, NH₃

CLIP Lyte 4

4 risultati per CLIP – 12 CLIP per confezione

Na⁺, K⁺, Cl⁻, Na⁺/K⁺

* Parametro calcolato

Un'accuratezza dei risultati comprovata

In medicina veterinaria la presenza di sostanze interferenti nei campioni di plasma o di siero (in campioni patologici emolizzati, itterici o lipemici) è un fattore molto comune e riguarda circa il 75% dei campioni.* La tecnologia "Dry-slide" a chimica secca utilizzata dai sistemi IDEXX è la più accurata tecnologia disponibile per le analisi in clinica. La struttura 'a strati' della piastrina permette di filtrare il campione analizzato trattenendo le sostanze che possono influire sull'accuratezza dei risultati forniti.

* Studio in archivio di IDEXX Laboratories, Inc.



2 SEMPLICI PASSAGGI
CARICATE E VIA!

